




**1** Imprima o guia de tamanho em "Tamanho real" ou "100%".

**Para conferir se a impressão está correta verifique se o quadrado mede 2,5 cm:**

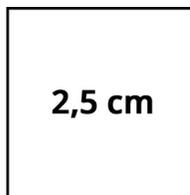

**2** Após confirmar se o guia foi impresso corretamente, recorte-o de acordo com as indicações.


**3** Mantenha a boca naturalmente aberta e experimente cada tamanho.

**(1)** A parte superior da almofada deve ficar na ponte nasal alinhada com a altura dos olhos.

**(2)** A base da almofada deve ficar no meio do queixo, cerca de 1 cm abaixo do lábio inferior.



Escolha o menor tamanho que cobre a boca e o nariz, sem obstruir os olhos ou encostar nos lábios.

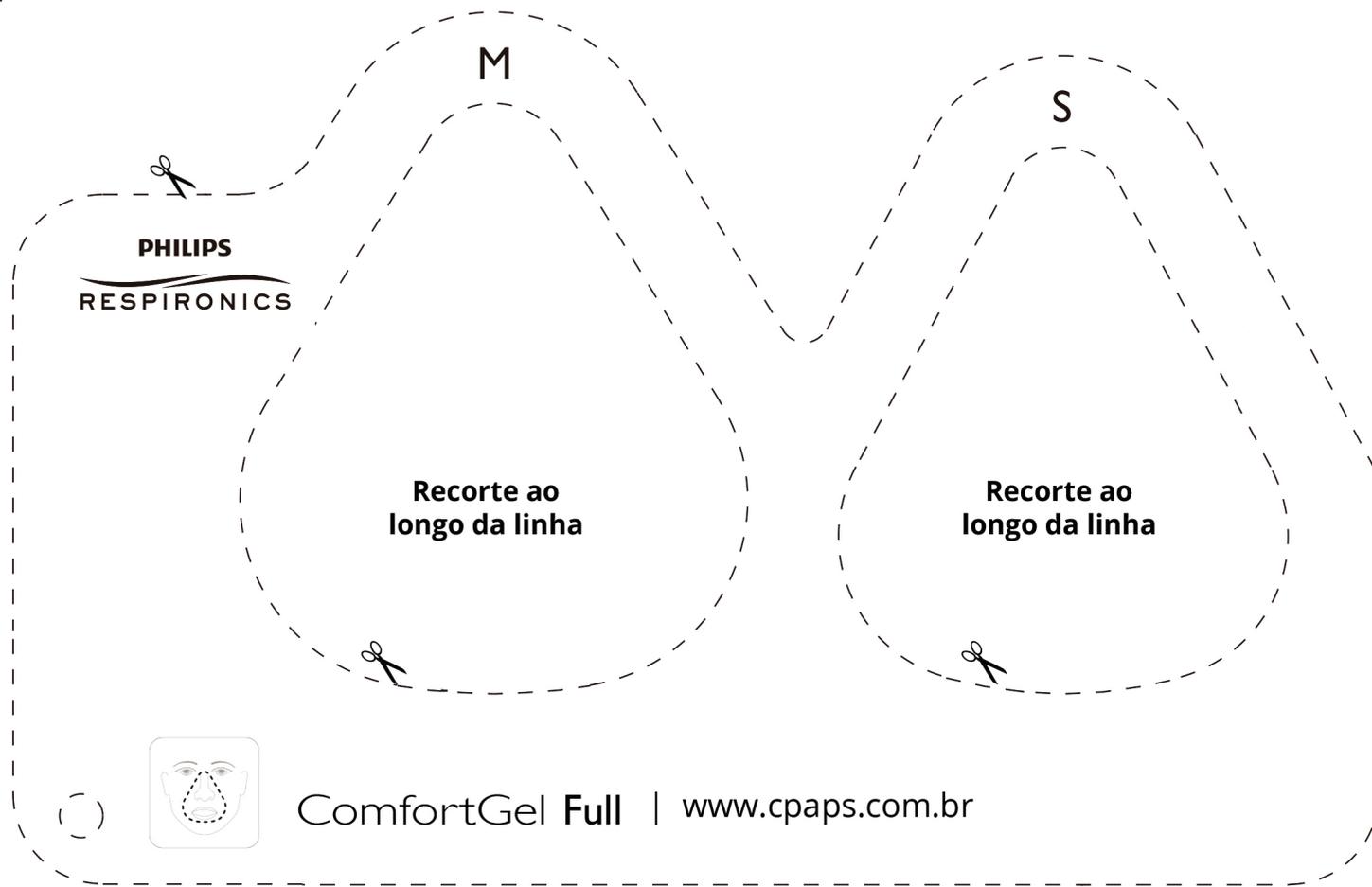



# GUIA DE TAMANHO

Para conferir se a impressão está correta verifique se o quadrado mede 2,5 cm:

