




GUIA DE TAMANHO

- 1 Imprima o guia de tamanho em "Tamanho real" ou "100%".

Para conferir se a impressão está correta verifique se o quadrado mede 2,5 cm:

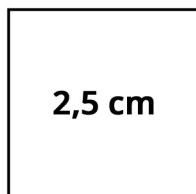


- 2 Após confirmar se o guia foi impresso corretamente, recorte-o de acordo com as indicações.

- 3 Experimente cada molde de almofada no nariz e escolha o menor tamanho de almofada que não fique obstruindo as laterais do nariz ou os olhos.




Ultra Mirage™ II

Mirage Activa™

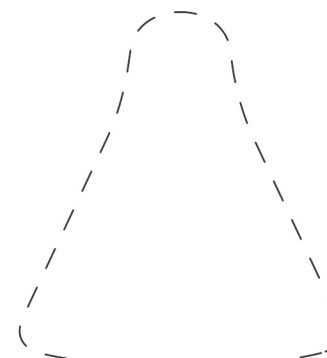


Tamanho Padrão (STD)

Altura: 4,7 cm
Largura: 4,5 cm

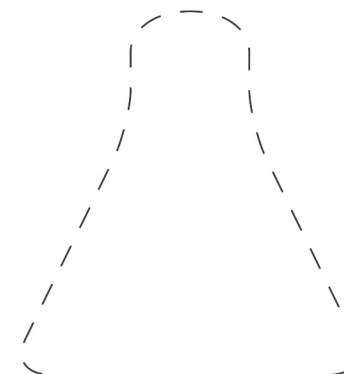


Tamanho Grande (L)

Altura: 4,9 cm
Largura: 4,5 cm

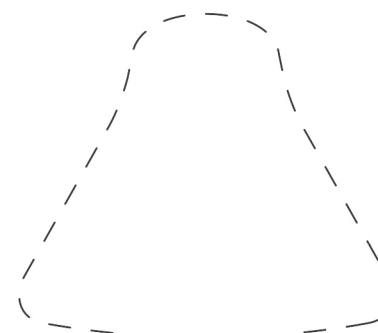

Tamanho: Plana (Shallow)

Altura: 4,4 cm
Largura: 5,0 cm

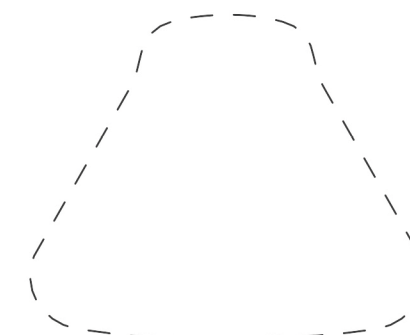

(somente Ultra Mirage II)
Tamanho: Plana Larga (SHALLOW WIDE)

Altura: 4,3 cm
Largura: 5,2 cm